

HidroDent® Irrigador Bucal



ORAL IRRIGATOR

Model NO.: HD-3000





Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.**

PELIGRO:

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No manipule el cargador con las manos mojadas.
- No coloque el cargador ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- Revise el cable del cargador por daños antes del primer uso y durante la vida útil del producto.


CONSIDERACIONES IMPORTANTES ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

- No conecte este dispositivo a un sistema de voltaje que sea diferente del sistema de voltaje especificado en el dispositivo o cargador.
- Si el producto se abre / desmonta por CUALQUIER motivo, la garantía queda ANULADA.
- No utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Póngase en contacto con HidroDent.
- No dirija el agua debajo de la lengua, hacia el oído, ojos, la nariz u otras áreas delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar daños graves en estas áreas.
- No dirija el agua hacia la nariz o el oído. La ameba potencialmente mortal, *Naegleria fowleri*, puede estar presente en un poco de agua del grifo o agua de pozo no clorada y puede ser mortal si se dirige a estas áreas.
- Use este producto solo como se indica en estas instrucciones o según lo recomendado por su profesional dental.
- Campo magnético: los marcapasos y dispositivos médicos implantados similares pueden verse afectados por el imán.
- Utilice únicamente puntas y accesorios recomendados por HidroDent
- No deje caer ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura del producto.
- Mantenga la unidad de carga y el cable lejos de superficies calientes.
- No use este producto al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- No use yodo, solución salina (solución salina) ni aceites esenciales concentrados insolubles en agua en este producto. El uso de estos puede reducir el rendimiento del producto y acortará la vida útil del producto. El uso de estos productos puede anular la garantía.
- Quítese las joyas orales antes de usar este producto.
- No lo use si tiene una herida abierta en la lengua o en la boca.
- Si su médico le aconsejó que recibiera premedicación con antibióticos antes de los procedimientos dentales, debe consultar a su dentista antes de usar este instrumento o cualquier otro auxiliar de higiene bucal.
- Es necesaria una supervisión estricta cuando este producto es utilizado por niños, inválidos o cerca de ellos.


GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

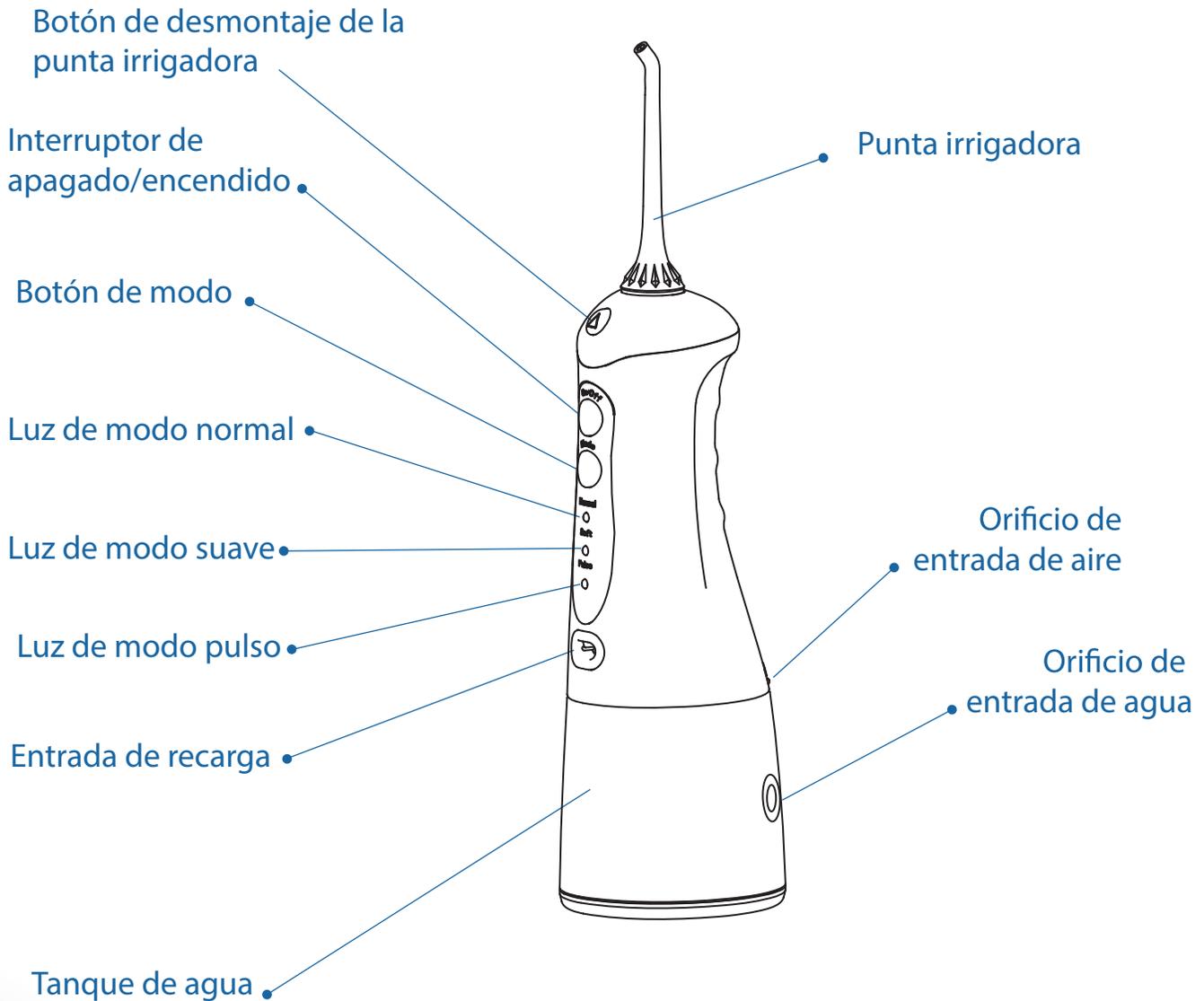


ACCESORIOS DEL PRODUCTO

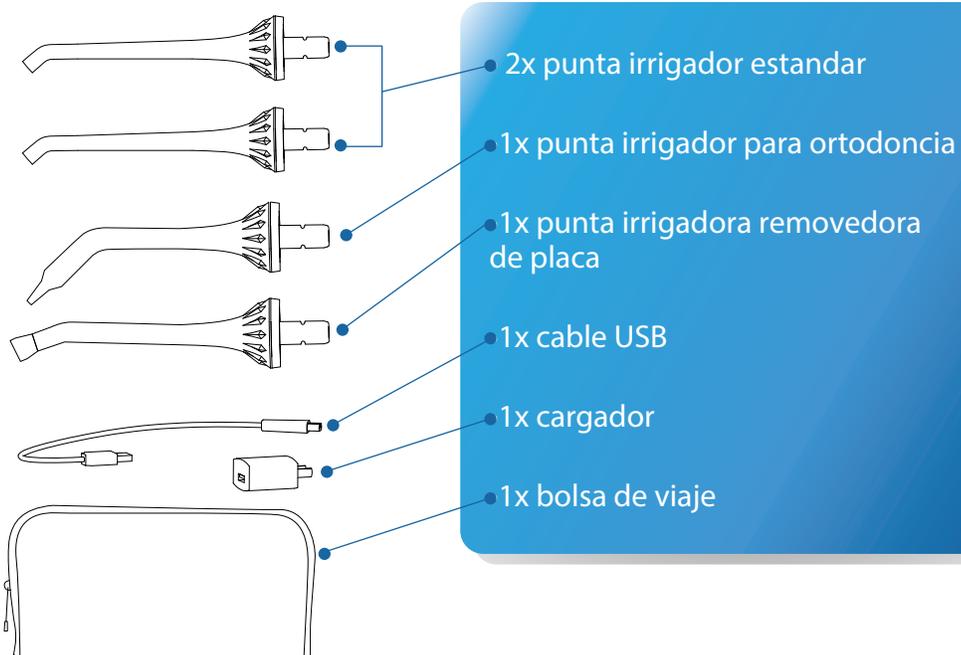

La punta irrigadora y otros componentes reemplazables pueden ser adquiridos en HidroDent.com.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

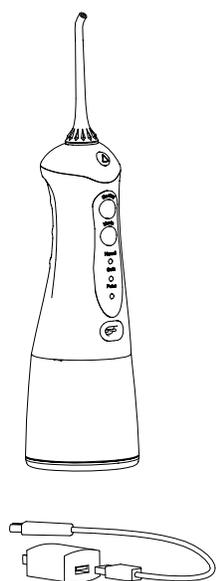


PREPARACIÓN PREVIA.


¡De extrema importancia! Antes de su primer uso, le rogamos que cargue totalmente el aparato durante 4 hs, enchufando el conector USB en la entrada de corriente y el otro extremo, a la fuente de alimentación. Durante su carga el producto no debe usarse.




MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PUNTA IRRIGADORA

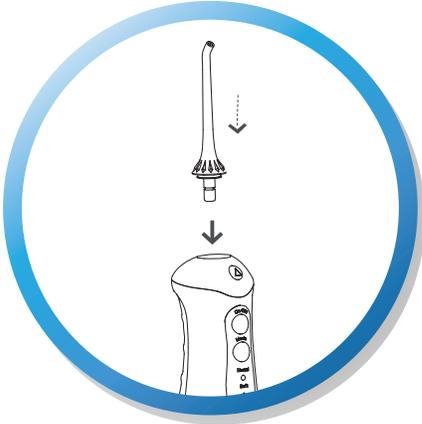

Inserte la punta irrigadora en el orificio de la cabeza de rociado, hasta que oiga un clic.

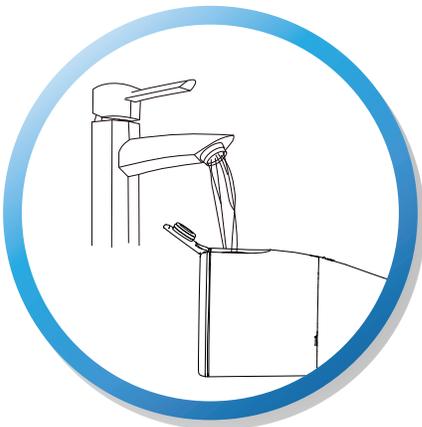

Abra la tapa de la cisterna de agua y vierta agua templada en la misma.
Aviso: Le rogamos que se asegure de que el aparato está apagado cuando vierta agua en la cisterna de agua.

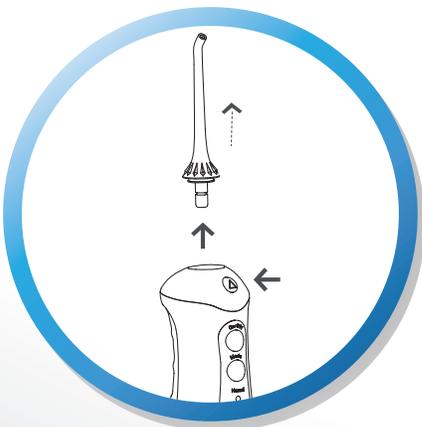

Al retirar o cambiar la punta irrigadora, le rogamos que antes de retirarla presione el botón de desmontaje situado en el mango de la punta irrigadora.




- Este producto tiene una función de memoria, tras su re-encendido el modo de presión de agua será el mismo que cuando el aparato se apagó.
- Se puede cambiar entre los modos Normal, Soft, y Pulse sin importar si el aparato está encendido o apagado.
- Los modos pueden cambiarse mientras el aparato está apagado, por lo que se puede elegir el modo que se desee antes de re-encender el aparato.
- Independientemente del modo, tras 120 segundos de funcionamiento el aparato se apagará automáticamente..
- Durante la recarga, las tres luces indicadoras parpadearán. Cuando las tres luces indicadoras estén encendidas de modo constante, esto indicará que la batería está recargada.
- Durante su uso, si las tres luces indicadoras parpadean, esto indicará que la energía del aparato es insuficiente y que se debe recargar.
- Durante la recarga el aparato no se deberá usar.
- Rote el dial de la punta irrigadora para ajustar la dirección del chorro de agua.








TÉCNICAS RECOMENDADAS

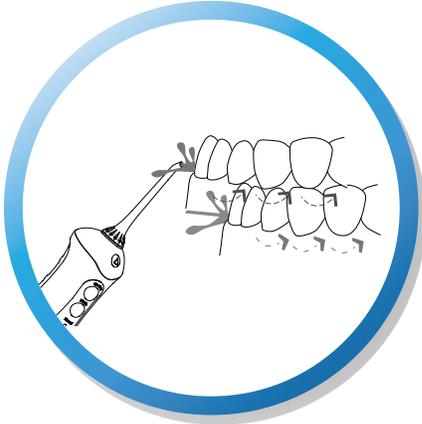

Manteniendo el aparato inclinado hacia abajo, coloque la punta irrigadora en la boca y apúntela hacia los dientes antes de encender el aparato.

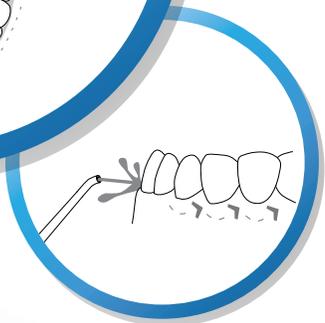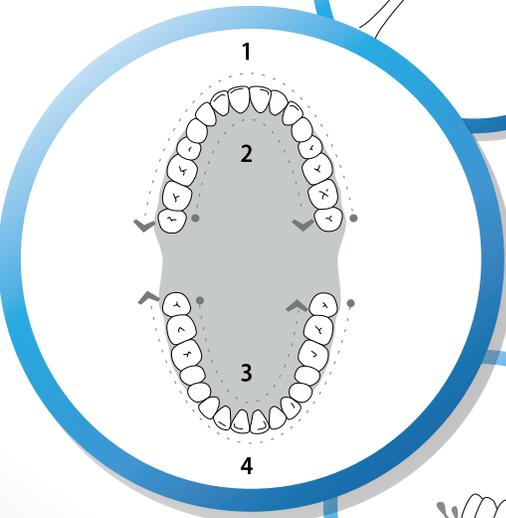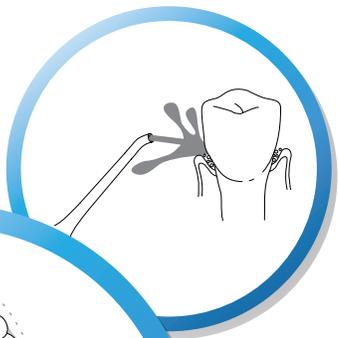


Una vez que el chorro de agua incida en un ángulo de 90 grados en la encía, cierre ligeramente la boca para evitar que el agua salpique fuera y conseguir un mejor resultado. Primero apriete los molares y premolares y aplique el chorro en los incisivos. Deslice el chorro a lo largo de la encía, parando brevemente entre los dientes, hasta que el área alrededor de las encías y los espacios entre los dientes estén totalmente limpios.

PASOS A SEGUIR


1

Apague el dispositivo y vacíe la cisterna de agua.

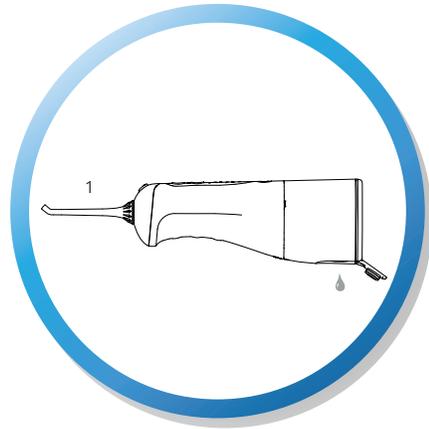

2

Usando ambas manos como se muestra en el Diagrama 2; utilice su mano izquierda para sujetar el cuerpo del producto y su mano derecha para sostener la cisterna de agua. Al mismo tiempo, para desmontar la cisterna de agua, extráigala rotando en el sentido contrario a las agujas del reloj.

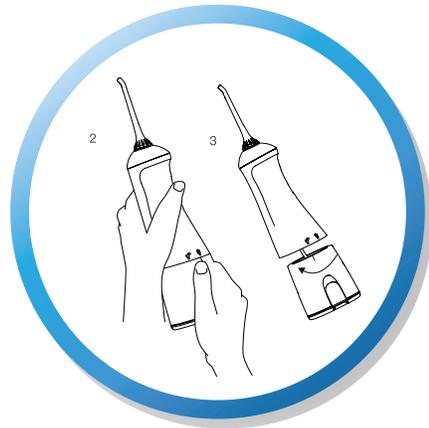



USO Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

- Previamente a su primer uso el aparato se deberá cargar totalmente, durante aproximadamente 4 horas.
- Si va a ser almacenado durante un periodo largo de tiempo, le rogamos que cargue el aparato previamente.
- Para maximizar la vida útil de la batería, le rogamos que la recargue con prontitud cuando la energía sea insuficiente.

USO DE LA BATERÍA

El dispositivo incluye una batería de litio que no debe ser reemplazada. Al final de la vida útil de la batería, le rogamos que la deposite en el punto de recogida o reciclaje de su municipio.



Problemas	Motivos	Modo de solucionarlo
Fuga de agua entre la punta irrigadora y la pieza roscada	El anillo obturador del casquillo fijo para la punta irrigadora está dañado y la punta irrigadora no se puede instalar adecuadamente.	Tras ponerse en contacto con el proveedor para su reparación, instale la punta irrigadora adecuadamente
Fugas de agua en la cisterna de agua	El anillo obturador está suelto	Reinstálelo correctamente
Presión inadecuada	Voltaje bajo	Recárguelo antes de usarlo
El aparato no se puede encender	Voltaje bajo	Recárguelo antes de usarlo
El producto no descarga agua	El filtro está obstruido	Limpie el filtro
Los lados de la cisterna tienen fugas de agua	El orificio de entrada de aire filtra agua	Habitualmente provocado por una excesiva presión de aire.



Si no se pueden resolver estos problemas con los métodos arriba mencionados, le rogamos que consulte con su proveedor o contacte con el servicio designado de reparación post-venta.

Le recordamos que:

1. Durante los primeros usos, le rogamos que seleccione “modo suave” para evitar el sangrado de las encías provocado por la falta de adaptación al uso. Después de una semana de uso habitual deberían apreciarse mejoras. Si el sangrado es excesivo o no remite tras UNA semana, sería recomendable acudir al dentista para revisar las encías.
2. No es recomendable el uso del producto por niños, úlceras bucales o llagas orales abiertas.

SERVICIOS POST-VENTA

Gracias por adquirir el irrigador dental portátil; le rogamos que recuerde los siguientes puntos.



- 1 Le rogamos que conserve la factura de compra válida emitida por el proveedor como documentación requerida para el mantenimiento.

- 2 El producto incluye un año de garantía contra fallos de funcionamiento no causados por el usuario, de acuerdo a la legislación estatal pertinente. Si el producto fue adquirido a través de Hidrodent.com, no se requerirá documentación, únicamente se deberá proporcionar el número de pedido para recibir el correspondiente servicio de mantenimiento gratuito post-venta que proporcionamos (en base a la fecha de compra del aparato indicada en la factura).

- 3 Cuando durante el período de mantenimiento se den las siguientes circunstancias, los costes y honorarios de servicios se cobrarán en función del caso:
 - Daños provocados por el mal uso o inadecuado mantenimiento causados por el consumidor;
 - Daños durante la reparación causados por servicios de reparación no designados por la compañía;
 - Ausencia de la documentación de compra pertinente o si han transcurrido más de dos años desde la fecha de fabricación;
 - Daños causados por el uso con propósitos comerciales;
 - Daños provocados por causas de fuerza mayor (tales como tormentas, terremotos o incendios).



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Servicio de mantenimiento

Los irrigadores HidroDent®, no tienen elementos eléctricos reparables por el consumidor y no requieren mantenimiento de servicio de rutina. Para todas las piezas y accesorios, visite www.hidrodent.com.

También puede llamar a nuestro número de servicio al cliente al +507 3086967 (Panamá), o puede escribirnos a info@hidrodent.com

¿Aún tienes preguntas? Vaya a www.hidrodent.com. HidroDent® garantiza al consumidor original de este nuevo producto que está libre de defectos en materiales y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. El consumidor deberá presentar el recibo de compra original como prueba de la fecha de compra y, si se solicita, el producto completo, para respaldar un reclamo de garantía. HidroDent® reemplazará a su discreción cualquier parte del producto, siempre que el producto no haya sido maltratado, mal utilizado, alterado o dañado después de la compra, se usó de acuerdo con las instrucciones y se usó solo con accesorios o partes consumibles aprobadas por HidroDent®.

Esta garantía limitada excluye accesorios o partes consumibles como puntas, etc. El uso con voltaje incorrecto dañará el producto y anulará la garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían, dependiendo de la ley en su lugar de residencia.